

DEKA
Innate Ability

NOUL SISTEM PRO

onda
PRO

Un NOU Aplicator pentru Lifting Facial cu Microunde

Evoluția Non-invazivă în Conturarea Feței

ONDA PRO se remarcă în **Estetică și Dermatologie**



ONDA PRO

EVOLUȚIE PRIN EXCELENȚĂ

LIFTING FACIAL &
REMODELARE

SKIN TIGHTENING

SLĂBIRE LOCALIZATĂ

CELULITĂ



Principii Cheie

După succesul platformei ONDA, DEKA a proiectat un aplicator specific, introducând o nouă soluție: PGW (Tehnologia Precision-GigaWave), ce permite efectuarea unei terapii într-o manieră și mai precisă și mai selectivă, extinzând astfel utilizarea microundelor inteligente Coolwaves® la nivelul feței, într-un mod sigur, eficient și non-invaziv.

Noul aplicator sporește performanțele Onda PRO: **POCKET**, caracterizat printr-o adâncime specială de acțiune, care efectuează o acțiune specifică de skin tightening și de lifting. Reduce grăsimea submentală, de asemenea.

Noul ONDA PRO conține singura tehnologie revoluționară pentru remodelarea corpului și a feței pe bază de microunde.

Acțiunea triplă ONDA PRO:

Lifting


Datorită tehnologiei proprii PGW, microundele Coolwaves de la ONDA PRO sunt și mai selective și produc un efect puternic de skin tightening, creând astfel un efect de lifting puternic.

Skin Tightening

Acțiunea profundă în derm produce o contracție imediată a fibrelor de colagen, iar producția nouă de colagen face țesuturile compacte și tonifiate, cu un aspect mai tânăr și mai natural.

Celulită & Slăbire Localizată

Coolwaves și tehnologia PWG distrug profund membranele celulelor adipoase subcutanate. Rezultatul este o remodelare precisă a corpului și a feței.

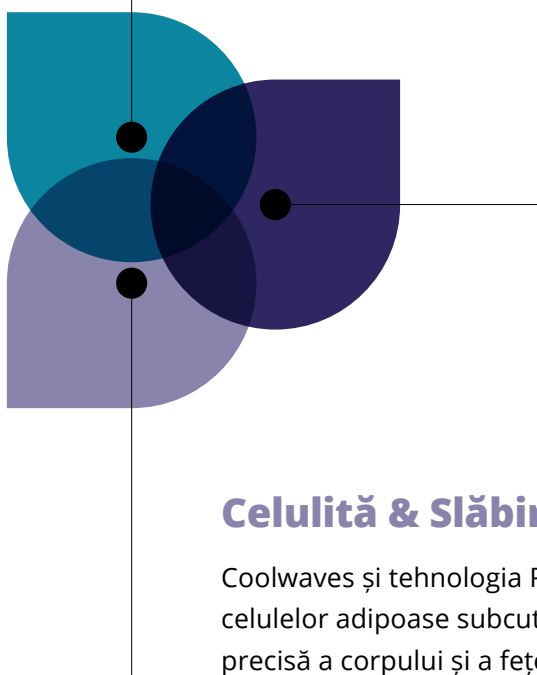



ȘTIINȚA DIN SPATELE TEHNOLOGIEI

Aplicatorul Pocket:

Proiectat ergonomic pentru a optimiza
eficacitatea pe zona feței

Butonul de Pornire/Oprire
al Tratatamentului

Aplicator
Ergonomic

Indicator de Control
al Emisiilor

Sistem de Răcire
Integrat



Extrem de precis

Aplicatorii sunt speciali concepuți pentru a emite microunde **Coolwaves®**. Datorită noii tehnologii PGW, energia se concentrează numai acolo unde este nevoie (în funcție de adâncimea diferită a acțiunii aplicatorului) și **țesutul din jur este conservat în totalitate.**

Adâncimi de Penetrare Diferite pentru Diferite Indicații de Utilizare

Cei 3 aplicatori, **Deep, Shallow și Pocket** diferă în funcție de acțiunea lor în profunzime. Fiecare este proiectat pentru **diferite zone și aplicații.**



Pocket*

Ideal pentru **Lifting** | **Face Tightening**



Shallow*

Ideal pentru **Celulită** | **Skin Tightening** | **Reducerea Grăsimii Submentale**



Deep*

Ideal pentru **Grăsimi Localizată**

Un Sistem Inteligent de Răcire Integrat


Un sistem de răcire la contactul cu pielea este încorporat în aplicatori și contrabalansează căldura indusă de microunde. **Dermul superficial este păstrat, asigurând confortul total pacientului** și minimizând efectele secundare sau inflamația.



ȘTIINȚA DIN SPATELE TEHNOLOGIEI

Tehnologia PGW și Mecanismul de Acțiune

Energia cu microunde este livrată către țintă: energia este acum limitată mai precis, provocând efecte diferite în zonele selectate la diferite adâncimi de penetrare.

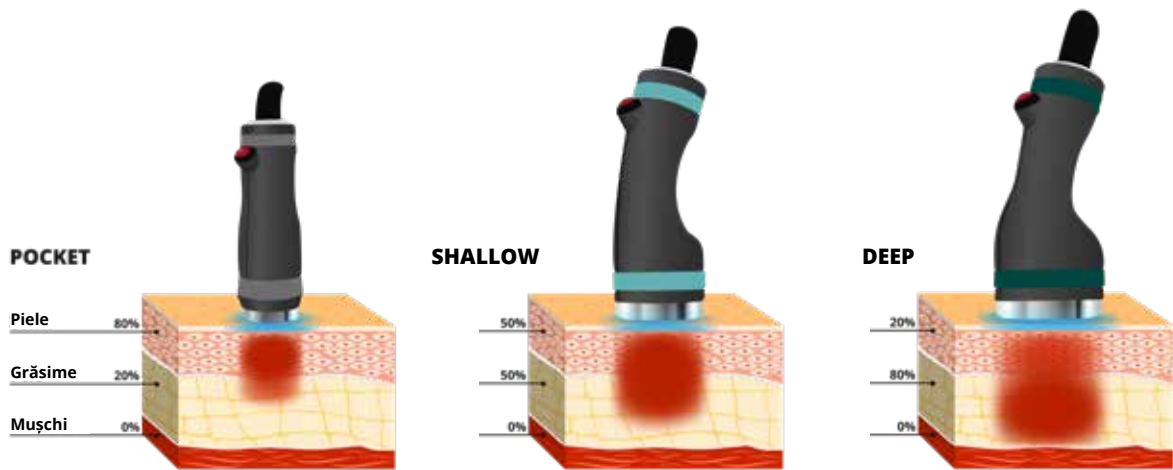



Rezultate Clinice



Cu amabilitatea lui
Neoasia (Singapore)



Cu amabilitatea lui
Prof. Paolo Bonan, MD
Dermatolog (Italia)



Cu amabilitatea lui
Dr. Anna Claudia Butera, MD
Dermatolog (Italia)



Cu amabilitatea lui
Dr. Joseph SeokBae Seo, M,D
Dermatolog (Korea de Sud)

PGW

Precision-GigaWave Technology

Coolwaves și Tehnologia PGW sunt Ultima Frontieră în Estetică

Microundele Coolwaves au fost introduse în 2018 ca prima tehnologie din lume care utilizează microunde speciale și sigure pentru tratarea adipozițiilor localizate, a celulitei și a laxității pielii pe tot corpul, în special pe abdomen, coapse și șolduri: ele dizolvă grăsimea, strâng și conturează pielea, întărind țesuturile.



Datorită eficacității PGW (Precision-GigaWave Technology) procedura cu microunde este cel mai solicitat tratament de vedete în S.U.A.



Câteva Cuvinte de la Utilizatorii de Onda PLUS

“Am o experiență de peste 25 de ani în utilizarea sistemelor RF și a altor dispozitive bazate pe energie, totuși am descoperit recent Onda PRO și am fost impresionat de rezultatele microundelor coolwaves în zone faței. Am avut intuiția că microundele reprezintă un punct de cotitură pe piața tratamentelor faciale și am avut dreptate. Folosesc Onda PRO pentru lifting, strângere, pentru a reduce grăsimea și, de asemenea pentru a obține rezultate incredibile. Motivul eficacității sale este adâncimea corectă de acțiune: Cu Onda PRO avem posibilitatea de a folosi aplicatori cu adâncime de acțiune diferită (3mm și 7mm) în funcție de tipul de tratament (acțiune mai mare asupra dermului sau asupra grăsimii). Rezultatul este un efect de lifting complet, strălucire și netezire a pielii feței, fără timp de recuperare și disconfort minim/suportabil”.

“ Onda PRO este o nouă platformă pe care, pornind de la aplicarea sa istorică în modelarea corpului, o putem aplica acum pe pielea feței. De asemenea, este foarte eficientă pentru pielea lăsată, deoarece putem exploata acest tip de energie - microundele speciale - nu numai pe grăsimea feței, ci și interacționând cu colagenul, astfel încât putem personaliza această aplicație folosind diferiți aplicatori: 3mm (Pocket) și 7mm (cel mai mare pentru țesutul adipos al feței), astfel încât să putem adapta chiar și acest tip de instrument pentru orice tip de indicație pe care o avem: Față mai mare, piele lăsată, strângere, lifting real.

Datorită acestui tip de energie, practic nu avem efecte secundare: este total nedureroasă, doar o senzație modestă de arsură și nu avem niciun fel de eritem sau umflare. Putem rezolva mai multe probleme: Ne-am redus operația cu cel puțin 50% din cazuri pentru că putem obține liftingsuri minunate ale feței (interacțiune excelentă cu laxitatea și fibrele de colagen).

Una dintre caracteristicile acestei energii, în comparație cu RF este leziunea termică prelungită a țesutului: există rezultate excelente chiar și în zona adiacentă (adică pleoapa și linia maxilarului scăzute), deoarece sunt afectate de difuzia termică.

Acest lucru face ca această procedură să fie unică pe piață, deoarece nu avem niciun alt instrument capabil să efectueze acest tip de rezultat. În concluzie putem spune ONDA PRO - în aplicarea specială pe față - poate fi considerată o procedură iconică în domeniul cosmetic, și în procesul de strângere și lifting al feței. Obținem rezultate excelente fără a folosi consumabile.”

Prof. Paolo Bonan, MD- Dermatologist

ONDA PRO ESTE SUSTENABIL

Sistemele și dispozitivele Deka sunt toate proiectate și asamblate în Italia. Pentru a ne atinge obiectivele de sustenabilitate și pentru a face lanțul nostru de aprovizionare trasabil, transparent și de încredere, stabilim standarde internaționale de mediu pentru noi și furnizorii noștri.

SOLUȚIA PERFECTĂ

Avantaje ONDA PRO

- Microundele Coolwaves ale aparatului ONDA PRO sunt mai selective și eficiente datorită **Tehnologie PGW**
- **Coolwaves** este primul tratament non-invaziv de reducere a grăsimilor, de skin tightening și remodelare
- Potrivit **pentru toate tipurile de piele**
- **Fără timp de recuperare sau vânătăi**
- **O experiență fantastică**
Nu doare ca tratamentele chirurgicale corporale invazive și dureroase
- **Acțiune triplă selectivă** bazată pe diferite adâncimi de acțiune a aplicatorului
- Focus pe **Siguranță și Eficacitate**
- **Fără materiale de unică folosință inutile și consumabile**

 **Doar pentru utilizatorii DEKA:**
un mare sprijin în practica medicală

DEKA Club

**Un NOU Soft
Ușor și Interactiv**

**Aplicatori Ergonomici
(POCKET, SHALLOW, DEEP)**



Lumini LED

COOLWAVES®

Tehnologia PGW

Specificații Tehnice

ONDA PRO	
Sursă	Microwaves - Coolwaves® (Tehnologia PGW)
Frecvență	2.45 GHz
Putere	Up to 200 W
Aplicatori Smart	Deep - Shallow - Pocket
Răcire Aplicatori	Sistem de răcire patentat integrat
Controlul Emisilor	Trăgaci
Bază de Date	Protocoale de tratament și tutoriale integrate
Dimensiuni și Greutate	110 (H) cm x 40 (W) x 70 (D) cm 60 Kg
Cerințe Electrice	100-240 Vac - 50/60 Hz - 1500 VA



🏠 R. Moldova, Chișinău,
str. A. Șciusev 37

📞 +373 691 77 007

📷 profmedaesthetics

📘 profmedaesthetics

DEKA
Innate Ability