

DEKA
Innate Ability

NOUL SISTEM PRO

redtouch
PRO

Activarea Naturală a Procesului de Regenerare al Pielii

Acțiune TRIPLĂ printr-un Sistem Exclusiv de Lungimi de Undă

REDTOUCH PRO se remarcă în **Medicina Estetică**



REDTOUCH PRO

EXCELENȚA EVOLUȚIE ÎN TEHNOLOGIE

REGENERARE NON-ABLATIVĂ
A PIELII

PREJUVENARE (RELIVE)

REDUCEREA RIDURILOR
FACIALE

ROȘEAȚĂ VASCULARĂ
FACIALĂ

LEZIUNI BENIGNE
PIGMENTARE

MELASMA

LAXITATEA PIELEI

ALOPECIA
ANDROGENETICĂ (AGA)

VERGETURI
(STRIAE DISTENSAE)



Principii Cheie

RedTouch PRO este răspunsul DEKA la noua cerere de tratamente pentru întinerirea pielii faciale cu soluții minim invazive. RedTouch PRO, datorită lungimii de undă unice și exclusive, funcționează pe 3 niveluri: Riduri, discromie și vascular, permițându-ne să obținem regenerarea totală a pielii.

Tratamentul **ReLive** acționează într-o manieră preventivă asupra îmbătrânirii pielii, maximizând efectul de umplere într-un mod complet natural.

RedTouch PRO reprezintă astăzi singura soluție pentru a satisface cerințele profesioniștilor și pacienților care au nevoie din ce în ce mai mult de proceduri eficiente, non-invazive, nedureroase, fără timpi de recuperare și fără efecte secundare.

De ce să alegi REDTOUCH PRO?

Țintă Triplă de Acțiune și Eficacitate pe Melasmă


RedTouch PRO acționează pe componenta cromatică la nivel epidermic, dar și pe colagen și componenta vasculară (la nivel dermic). Această triplă acțiune îl face deosebit de eficient asupra melasmei.

ReLive

ReLive: este răspunsul RedTouch PRO la cererea tot mai mare de tratamente de prejuvenare. Acțiunea directă asupra colagenului și lezarea țesutului extrem de scăzută ne permite să lucrăm și într-o manieră preventivă împotriva îmbătrânirii pielii.

Eficacitate Maximă cu Timp de Recuperare Minim

Exclusivitatea și selectivitatea mai mare a lungimii de undă, care este absorbită direct de colagen, permit o terapie mult mai eficientă asupra stimulării și producerii de fibre noi, cu o cerință mai mică de energie în comparație cu lungimile de undă care acționează asupra apei.

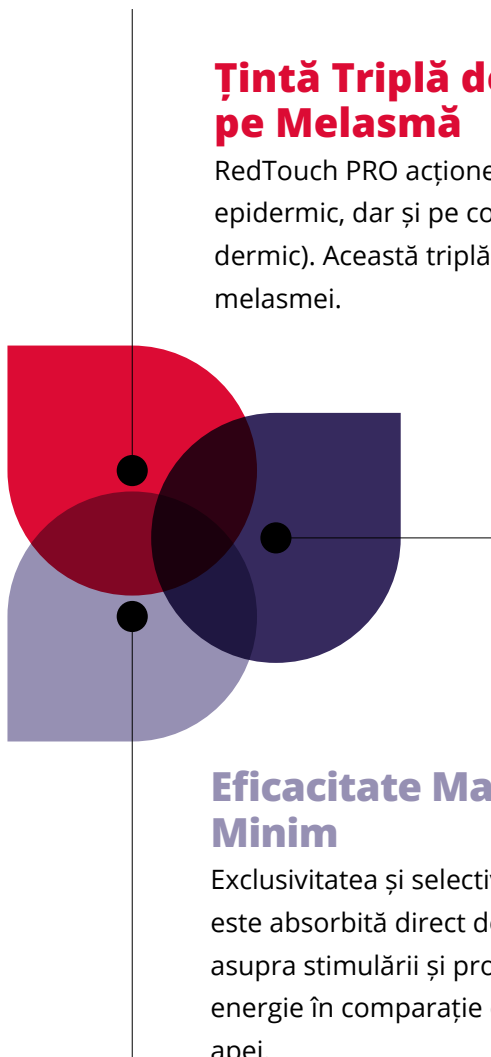



ȘTIINȚA DIN SPATELE TEHNOLOGIEI

O Nouă Tehnologie Avansată pentru PROfesiioniști

RedTouch PRO este evoluția sistemului RedTouch, îmbunătățită ca: performanță, putere, modalitate de transmitere a energiei și răcire, aspecte tehnologice care influențează viteza de tratament, tolerabilitatea și eficacitatea acestuia.

RedTouch PRO, până în prezent, este un sistem unic și exclusivist, incomparabil cu alte sisteme: este răspunsul la o cerere din ce în ce mai importantă, aceea de a obține tratamente eficiente, fără timpi de recuperare sau limitări ale vieții sociale.

RedTouch PRO adaugă, de asemenea, modalitatea **MOVEO**: extinzându-și tratamentele și pe fototipuri închise la culoare sau pe piele bronzată, permițând o viteză de tratament și o manevrare incomparabilă.

RedTouch PRO cu un sistem de scanare integrat, a fost proiectat pentru a obține cele mai bune performanțe în transmiterea energiei către piele cu o ergonomie optimizată.

Aplicatorul RedTouch PRO:

Scanner integrat

Design ergonomic





Mecanism de Acțiune


Microzonele de deteriorare termică (mai puțin de 1 mm diametru) induc o denaturare consecutivă imediată a fibrei de colagen care duce la un proces de neocolageneză.

Datorită sistemului de răcire integrat și a selectivității lungimii de undă de 675 nm, stratul epidermic nu este deteriorat, minimizând astfel efectele secundare și timpul de recuperare aferent.

Sistem integrat
de răcire al pielii


Moveo

Emisie fracționată

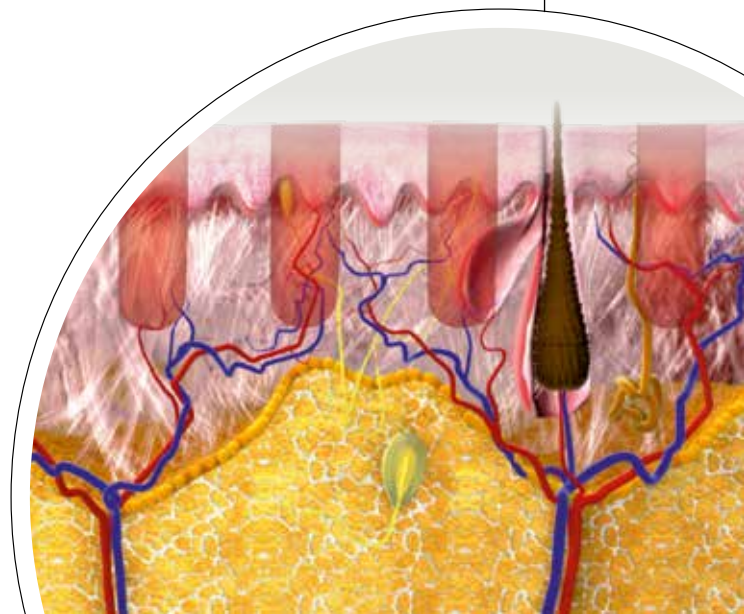

675 nm: Explorarea Unei Noi Lungimi de Undă Selective și Multi-țintă

RedTouch PRO este primul și singurul sistem care folosește această lungime de undă: neutilizată până în prezent. Este cea mai selectivă pentru colagen, dar și eficientă asupra leziunilor pigmentare și vasculare. Această țintă triplă îl face deosebit de eficient în diverse aplicații.

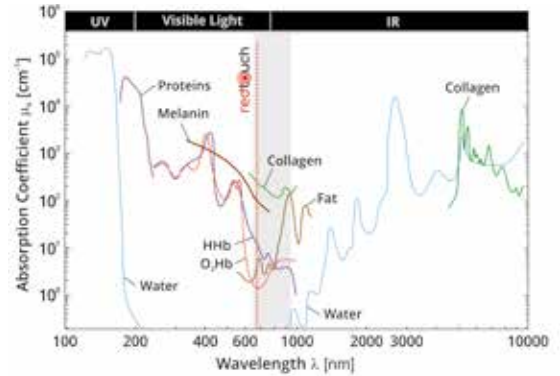

Melasma

Lungimea de undă între 650 și 850 nm este cea mai bună pentru a viza selectiv melanina. În plus, deși hemoglobina nu este ținta principală, capacitatea de 675 nm de a interacționa cu colagenul vaselor de sânge are ca rezultat creșterea tonusului dermic și a turgenței, precum și o continuitate mai mare a sistemului vascular.

Vergeturi (Striae Distansae)

RedTouch PRO acționează asupra componentei vasculare a striurilor, cu efect calmant și uniformizant.

Alopecia Androgenetică (AGA)

Lungimea de undă de 675 nm este capabilă să atingă dermul reticular până la 2-3 mm de penetrare adâncă și a fost utilizată eficient în stimularea fazei Anagen care reprezintă faza de creștere activă a foliculilor de păr.



ReLive este un tratament special conceput pentru a preveni procesul de îmbătrânire și pentru a menține aspectul tineresc. Acțiunea directă asupra colagenului stimulează producția de noi fibre într-o manieră mai eficientă și, prin urmare, o adevărată regenerare a țesutului. Aceste caracteristici, împreună cu emisia fracționată a energiei și răcirea încorporată, ne permit să lucrăm într-o manieră eficientă, fără deteriorarea epidermei, menținând astfel timpii de recuperare la minimum.





Rezultate Clinice



Cu amabilitatea lui Luigi Coricciati,
M.D., *Lecce - Italia*



Cu amabilitatea lui Viviana Paris, M.D.,
Bologna - Italia



Cu amabilitatea lui Luigi Coricciati, M.D.,
Lecce - Italia



Cu amabilitatea lui Massimo Vitale, M.D.,
Bologna - Italia

Cunoașterea Publicului și Pieței

În ultimii câțiva ani, industria estetică medicală a evoluat drastic odată cu introducerea noilor tehnologii, trecând de la tratamentele de fotoîntinerire invazive la cele non-invazive.

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele secundare reduse care pot fi obținute prin proceduri cosmetice minim non-invazive în rândul populației generale va crește și mai mult rata de adoptare a dispozitivelor medicale estetice.

Mai mult, medicina regenerativă este considerată a fi următoarea descoperire în știința medicală. Oamenii doresc terapii care sunt naturale.

Fotoîntinerire globală*



+6.6% CAGR

PESTE PERIOADA PROGNOSTICATĂ



↑ 2.5 miliarde \$

AȘTEPTAT PÂNĂ ÎN 2025



+14.5%

CREȘTERE ANUALĂ A PRODUSELOR REGENERATIVE



Millennials și
Generația Z

**REPREZINTĂ UN CONTINGENT ÎN CREȘTERE
DE NOI PACIENȚI**

*Sursă: Global Market Insights, Inc. - Photorejuvenation Devices Market Size by Product, Industry Analysis Report, Regional Outlook, Modality Potential, Competitive Market Share & Forecast, 2019 - 2025]



Câteva Cuvinte de la Utilizatorii RedTouch PRO

« Cu RedTouch PRO tratamentul melasmei a devenit simplu și oferă rezultate optime deoarece acționează asupra tuturor celor 3 elemente care stau la baza acestei imperfecțiuni.

Este o terapie laser ce face parte din medicina regenerativă care, pornind de la un protocol personalizat și făcând un follow up periodic care nu implică niciun angajament post-tratament, îmbunătățește și textura cutanată, în ceea ce privește crono și foto îmbătrânirea.”

Prof. Luigi Coricciati, M.D.
Lecce - Italia

FABRICAT ÎN ITALIA

Sistemele și dispozitivele
Deka sunt toate proiectate și
asamblate în Italia.

Pentru a ne atinge obiectivele de
sustenabilitate și pentru a face lanțul
nostru de aprovizionare trasabil,
transparent și de încredere, stabilim
standarde internaționale de mediu
pentru noi și
furnizorii noștri.

FĂCUT ÎN MOD SUSTENABIL

SOLUȚIA PERFECTĂ

AVANTAJE RedTouch PRO

Confort total pentru operator și pacient:

- Lungime de undă unică și exclusivă: acțiune selectivă cu **triplu efect: colagen + melanină + vascular**
- Stimularea și producția maximă de **colagen nou** (medicină regenerativă)
- **Eficacitatea reală asupra melasmei** a fost demonstrată științific
- Efect secundar minim, chiar și pe **fototipurile mai întunecate** datorită **Tehnologiei Moveo**
- **ReLive** este răspunsul eficient și natural la tendința de prejuvenare
- Maximizează **efectul augmentărilor (fillere)**
- **Acțiune preventivă** asupra îmbătrânirii pielii
- **ROI RAPID** - fără consumabile

 **Numai pentru utilizatorii DEKA:**
un mare sprijin în practica medicală
DEKA Club

Un NOU
Soft
Intuitiv

Apicator ergonomic
cu sistem de scanare
integrat

Modul MOVEO



Specificatii Tehnice

REDTOUCH PRO	
Tip Laser	675 nm Diode Laser
Putere	15 W (Max)
Zonă Scaner	15 mm x 15 mm (Max)
Formă Scaner	Punct, Linie, Triunghi, Elipsă, Hexagon, Pătrat, Inel
Mod Scaner	Normal - Interlaced - SmartTrack - Moveo
SmartStack	1-5
Dwell Time	25-250 ms
Spațiere	0-4 mm
Controlul Emisiilor	Pedală
Răcire	Sistem integrat de răcire a pielii (5°C)
Dimensiuni și Greutate	122 (H) cm x 42 (W) cm x 54 (D) cm 30 kg
Cerințe Electrice	100-240 Vac - Monofazic - 50/60 Hz - 600 VA

ATENȚIE - Radiații laser vizibile și invizibile. Evitați expunerea ochilor sau a pielii la radiații directe sau împrăștiate. Produs laser clasa 4.



🏠 R. Moldova, Chișinău,
str. A. Șciusev 37

📞 +373 691 77 007

📷 profmedaesthetics

📘 profmedaesthetics

DEKA
Innate Ability